



LABORATORY AND MEDICAL EQUIPMENT

Laboratorní a zdravotnická technika OPTING servis

Bohumínská 788/61, 710 00 Ostrava 10, CZECH REPUBLIC

596241785; 596 241 960 fax 596 241 852 GSM 603 464 790

www.optingservis.cz E-mail: optingservis@optingservis.cz

Nosnost nejprodávanějších matrací, přehled značek k matracím.

Standardní rozměry: 200 x 90 cm. Rozměry nad: 200 x 90 cm cena +15%.

- Ergonomic, Ergonomic flex
- Hospital, Hospital flex
- Clinic, Clinic flex
- Lux, Lux flex
- Prevent, Prevent flex

Označení:



thermoaktivní
PUR pěna



anatomické
zóny



antidekubitní úprava
jádra



klinicky
testováno



paroprodyšný
potah



oboustranná
matrace



doporučená
nosnost

Doporučená nosnost:

- 1 – nízká nosnost do 60 kg
- 2 – standardní nosnost do 90 kg
- 3 – zvýšená nosnost do 120 kg
- 4 – velmi vysoká nosnost nad 120 kg



Jádro = matrace lze sterilizovat horkou párou.

Výška matrace v cm v naší nabídce:

výška matrace 12 cm, nosnost nad 120 kg

výška matrace 14 cm, nosnost do 160 kg

výška matrace 20 cm, nosnost do 180 kg

výška matrace 25 cm, nosnost do 240 kg

Součástí každé matrace (již v ceně) je:

Potah SAFR je snímatelný se zipem, prateľný na 95°C, voděodolný, paropropustný, se sníženou hořlavostí a pružný ve všech čtyřech směrech. Potah je šitý, po celém obvodu otevírací na zip.



Barva: bílá, béžová, světle modrá - nutno zadat při objednání !

Zabezpečení zipu proti protečení tekutiny do jádra matrace u šitých potahů.

Potah je nepromokavý, prací.

Matrace s potahem SAFR slňuje Vaše požadavky dle normy ČSN P ENV 14237 (804110) Textilie ve zdravotnictví.



Polyesterový úplet se zátěrem z ekologicky čistého polyuretanu, který zaručuje: pružnost v podélném i příčném směru, paroprodyšnost, vodoodpudivost, stálost, odolnost proti účinkům moči, krve a pod.

Potah je antialergický, antibakteriální, lze jej ošetřovat běžnými desinfekčními prostředky, mimo prostředky obsahující fenol a formaldehyd. Lze jej prát do teploty 95°C.

Matrace Ergonomic, vysoké riziko dekubitu III. - IV.

Rozměry: 200 x 90 x 14 cm,

Materiál R3734 (studená pěna) + GV 5030 (líná pěna), včetně potahu Safr 200g/ m²



Pasivní matrace jsou vyvíjeny na základě měření rozložení tlaků matrace na tělo pacienta pomocí speciální senzorové podložky. Tlakové mapy znázorňují schopnost matrace rozložit tlak vyvolaný vahou pacienta.

Ideální antidekubitní matrace dosahuje hodnot tlaku na riziková místa pod 32 mmHg. (4,27 kPa) to je tlak, při kterém dochází k uzavření drobných kapilár ve tkáních a následkem toho se tkáň nevyživují, neodvádějí se škodliviny a nefunguje termoregulace.

- Pasivní antidekubitní jednostranná matrace. Je navržena pro pacienty s vysokým stupněm rizika vzniku dekubitů. Norton 20-13.
 - Jádro matrace je standardně 14 cm vysoké. Je vyrobeno ze studené PUR pěny v základně matrace a termoaktivní (líné) pěny v ložné ploše. Tato líná pěna má výrazné antidekubitní vlastnosti. Ložná plocha je podélně i příčně prořezaná a rozdělená do 7 anatomických zón, čímž je zabezpečeno rovnoměrné rozložení hmotnosti pacienta. Průřezy v matraci zajišťují cirkulaci vzduchu, odvádí páry a zároveň chrání pacienta před vlhkostí a přehřátím.
-

Matrace Hospital Flex, riziko dekubitu II.

Rozměry: 200 x 90 x 12 cm.

Materiál: studená pěna + 3D úplet, včetně potahu SAFR 200g/ m²

Verze flex = zpevněné okraje.




- Pasivní antidekubitní jednostranná matrace. Je navržena pro pacienty s nízkým stupněm rizika vzniku dekubitů. Norton 25-21. Matrace obdržela ocenění GRAND PRIX PRAGOMEDICA 2006.
- Jádro matrace je standardně 12 cm vysoké. Je vyrobeno ze studené PUR pěny a speciálního materiálu 3D mřížka. Je příčně prořezané a tím rozdělené do pěti anatomických zón, čímž je zabezpečeno rovnoměrné rozložení hmotnosti pacienta. Průřezy v matraci zajišťují cirkulaci vzduchu, odvádí páry a zároveň chrání pacienta před vlhkostí a přehřátím.
- Potah SAFR je snímatelný se zipem, prátelný na 95°C, voděodolný, paropropustný, se sníženou hořlavostí a pružný ve všech čtyřech směrech. Potah je šitý, za příplatek možnost dodat potah vyrobený VF svařováním.

Matrace Clinic, dekubitu: II. - III.

Rozměry: 200 x 90 x 13 cm.

Materiál: studená pěna, včetně potahu SAFR 200g/m²

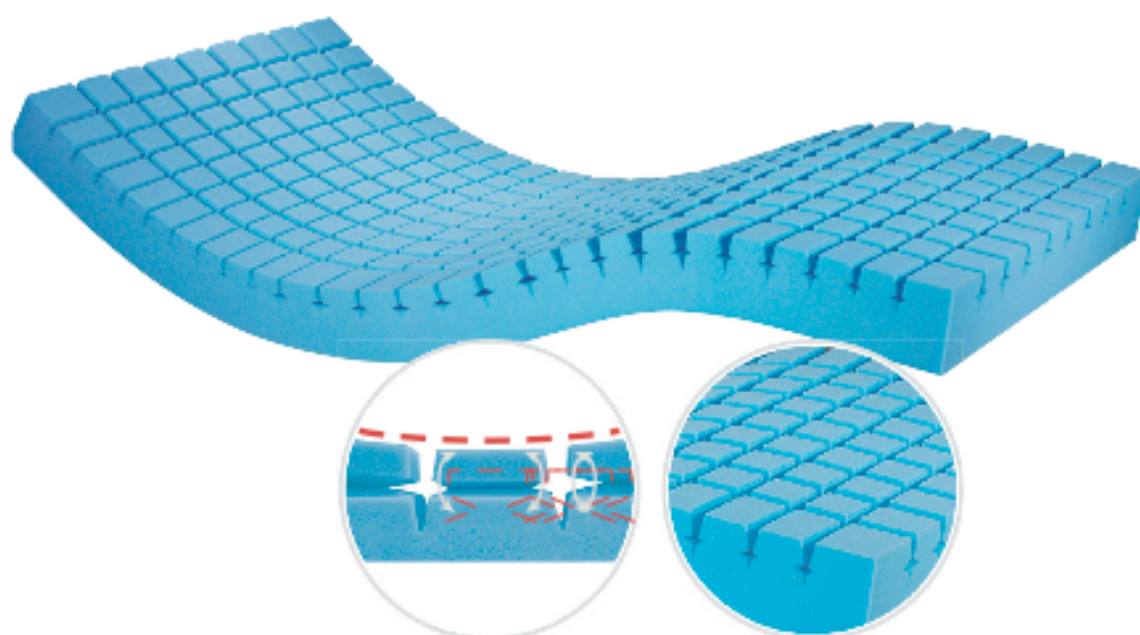

Clinic, studená pěna, jádro: 13 cm, včetně potahu SAFR 200g/m² riziko dekubitu: II. - III. Pasivní antidekubitní jednostranná matrace. Je navržena pro pacienty se středním stupněm rizika vzniku dekubitů. Norton 20-17.


Clinic Flex - tyto matrace jsou shodné s matracemi CLINIC. Navíc mají tyto matrace vyztužené boky tužší PUR pěnou. Pacient je na těchto matracích stabilnější, má dobrou oporu při vstávání z lůžka a nebo při přesunu na vozík. [Verze flex = zpevněné okraje.](#)

- Pasivní antidekubitní jednostranná matrace. Je navržena pro pacienty se středním stupněm rizika vzniku dekubitů. Norton 20-17.
- Jádro matrace je standardně 13 cm vysoké. Vyrábí se ze studené PUR pěny. V ložné ploše jádra matrace je proveden nový revoluční prořez (chráněný vzor), který zabezpečuje velkou roznášecí schopnost díky výkyvným, ve všech směrech a nezávisle reagujícím podpěrným čtverečkům. Tyto celou svou plochou kopírují kontury těla a tím snižují tlaky na tkáň. Zvětšené průřezy v matraci zajišťují lepší cirkulaci vzduchu, odvod páry a zároveň více chrání pacienta před vlhkostí a přehřátím.
- Potah SAFR je sňatelný se zipem, pratelný na 95°C, voděodolný, paropropustný, se sníženou hořlavostí a pružný ve všech čtyřech směrech. Potah je šitý, za příplatek možnost dodat potah vyrobený VF svařováním.

Matrace Clinic Flex, riziko dekubitu II. – III.

Rozměry: 200 x 90 x 13 cm.

Materiál: studená pěna, včetně potahu SAFR 200g/ m²

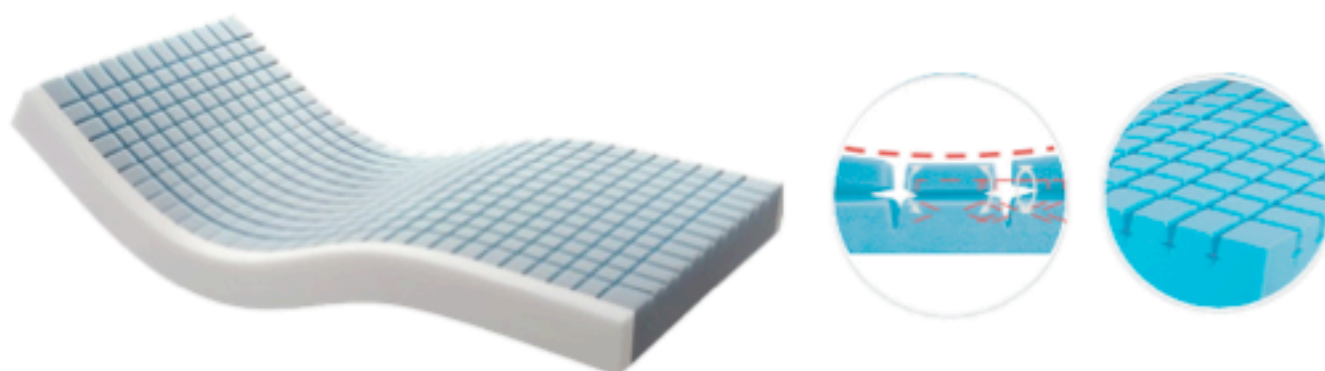

Tyto matrace vyztuženy boky tužší PUR pěnou. Pacient je na těchto matracích stabilnější, má dobrou oporu při vstávání z lůžka a nebo při přesunu na vozík.

Verze flex = zpevněné okraje.

- Pasivní antidekubitní jednostranná matrace. Je navržena pro pacienty se středním stupněm rizika vzniku dekubitů. Norton 20-17.
 - Jádro matrace je standardně 13 cm vysoké. Vyrábí se ze studené PUR pěny. V ložné ploše jádra matrace je proveden nový revoluční prořez (chráněný vzor), který zabezpečuje velkou roznášecí schopnost díky výkyvným, ve všech směrech a nezávisle reagujícím podpěrným čtverečkům. Tyto celou svou plochou kopírují kontury těla a tím snižují tlaky na tkáň. Zvětšené průřezy v matraci zajišťují lepší cirkulaci vzduchu, odvod páry a zároveň více chrání pacienta před vlhkostí a přehřátím.
 - Potah SAFR je snímatelný se zipem, pratelný na 95°C, voděodolný, paropropustný, se sníženou hořlavostí a pružný ve všech čtyřech směrech. Potah je šitý, za příplatek možnost dodat potah vyrobený VF svařováním.
-

Matrace Lux, riziko dekubitu II.

Rozměry: 200 x 90 x 25 cm.

Materiál R3734 (studená pěna) + R 4045, včetně potahu SAFR 200g/m²



Verze flex = zpevněné okraje.

Pasivní antidekubitní oboustranná matrace. Je navržena pro pacienty s nízkým stupněm rizika vzniku dekubitů. Norton 25-21.

Jádro matrace je standardně 14 cm vysoké. Je vyrobeno ze dvou studených PUR pěn s rozdílnou tuhostí. Je podélně i příčně prořezané a rozdělené do tří anatomických zón, čímž je zabezpečeno rovnoměrné rozložení hmotnosti pacienta. Průřezy v matraci zajišťují cirkulaci vzduchu, odvádí páry a zároveň chrání pacienta před vlhkostí a přehřátím.

Navíc mají tyto matrace vyztužené boky tužší PUR pěnou. Pacient je na těchto matracích stabilnější, má dobrou oporu při vstávání z lůžka a nebo při přesunu na vozík. Potah je šitý, za příplatek možnost dodat potah vyrobený VF svařováním.



Prevent Flex, riziko dekubitu III.

Rozměry: 200 x 90 x 15 cm.

Materiál: líná pěna + studená pěna, včetně potahu SAFR 200g/ m²



Verze flex = zpevněné okraje



Prevent, líná pěna + studená pěna, jádro: 15 cm, včetně potahu SAFR 200g/m² riziko dekubitu: III.

Pasivní antidekubitní jednostranná matrace. Je navržena pro pacienty se středním stupněm rizika vzniku dekubitů. Norton 20-17.

Jádro matrace je standardně 14 cm vysoké. Je vyrobeno ze studené PUR pěny v základně matrace a termoaktivní (líné) pěny v ložné ploše. Tato líná pěna má výrazné antidekubitní vlastnosti. Ložná plocha je zónovaná nopkováním pro lepší provzdušnění matrace a lehkou masáž těla.

Potah SAFR je snímatelný se zipem, pratelný na 95°C, voděodolný, paropropustný, se sníženou hořlavostí a pružný ve všech čtyřech směrech. Potah je šitý, za příplatek možnost dodat potah vyrobený VF svařováním.

Prevent Flex - tyto matrace jsou shodné s matracemi PREVENT. Navíc mají tyto matrace vyztužené boky tužší PUR pěnou. Pacient je na těchto matracích stabilnější, má dobrou oporu při vstávání z lůžka a nebo při přesunu na vozík.

Matrace Prevent Flex, líná pěna GV 5030+ studená pěna R045, tl. 15 cm, vč.potahu SAFR

Návod na obsluhu a použití matrací:

Vážení odběratelé,

děkujeme Vám, že jste si zakoupili matraci naší výroby. Přejeme Vám příjemný spánek a vydatný odpočinek.

Kvalita použitých materiálů je přísně hlídána, taktéž klademe vysoký důraz na luxusní zpracování. Veškeré použité materiály prošly náročnými testy na zdravotní nezávadnost, kterou dokazují certifikáty Öko-Text Standard.

Ortopedičnost konstrukce nabízených matrací byla zkoumána pomocí přístroje Ergo Check. Každá z nabízených matrací prošla při výběru vhodných kombinací materiálů dlouhodobým vývojem.

Dlouhou životnost matrací jsme testovali pomocí válcovacího přístroje a každá matrace prošla několika desítkami statistických cyklů.

Matrace Vám poskytne:

- ideální anatomické přizpůsobení a regeneraci svalstva během spánku
- uvolnění páteře a plotýnek
- použití do kterékoliv postele pouhou výměnou za starou matraci
- bezkonkurenční vzdušnost, ideálně váže vlhkost a rychle se jí zbavuje
- výrazné zlepšení osobám trpícím bolestmi zad
- preventivní terapie pro zdravé osoby

Rozměry matrací: dle nabídky či dohody s prodejcem.

Doporučené ošetřování:

Větrání- mějte na paměti, že matrace absorbuje tělesnou vlhkost. Je třeba, aby matrace důkladně větrala.

Vysávání- jedenkrát měsíčně

Čištění- dle potřeby suchou pěnou, případně vaxováním (mokrou pěnou se sníženým vlhčením s vysoušením)

U potahů opatřených zipem sledujte všivku, na které jsou symboly pro údržbu, potahy nelze sušit v bubnové sušičce.

Vhodné uložení matrací: abyste dosáhli ideálních ortopedických vlastností matrace a optimální vzdušnosti, je třeba zvolit vhodnou podložku. Pružinové matrace je vhodné uložit na pevnou desku nebo pevný rošt, kde mezery nepřesáhnou 4 cm, sendvičové a latexové matrace je vhodné uložit na lamelový rošt, který podpoří ortopedické vlastnosti matrace, popřípadě je možné je uložit na laťový rošt. Latexové matrace jsou vhodné pro polohovatelné rošty a to jak mechanické, tak i motorové.

Přeprava a skladování: matrace jsou baleny v PE folii. Matraci nikdy nepřekládejte, nelámejte a matrace s taškovou pružinou převážejte a skladujte pouze ve vodorovné poloze.

Letní a zimní strana je rozlišena všivkou se symbolem sluníčka, které je umístěno ve švu na boku matrace a symbolizuje letní stranu.

Komprimované matrace nechejte po vyjmutí z obalu min. 48 hodin bez zátěže.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY:

- 1) Na tento výrobek je poskytnuta záruční doba dle obchodního zákoníku. Záručním listem ve smyslu těchto reklamačních podmínek je zřetelně vyplněný prodejní doklad (datum prodeje, typ matrace, rozměr, razítko a podpis prodejce). Bez prodejního dokladu nemusí být reklamáce přijata.
- 2) Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, zákazník má právo zboží reklamovat. Podmínkou pro uznání reklamáce je, aby byla uplatněna v záruční době s platným prodejním dokladem.
- 3) PŘEVZETÍ ZBOŽÍ: Při převzetí zboží od posádky vozidla, pracovníků skladu či prodejny se zákazník přesvědčí o správnosti počtu předaných jednotek a neporušenosti obalu. Pokud má zboží při převzetí porušený obal, kupující je povinen přesvědčit se o celistvosti a neporušenosti zboží. Toto je třeba uvést do prodejního listu, jinak právo na mechanické poškození zboží zaniká. Pokud je zboží poškozeno pod neporušeným obalem, kupující je povinen na požádání tento obal předložit zástupci výrobního závodu při prošetření reklamáce, jinak reklamáce nebude uznána.
- 4) LHŮTA UPLATNĚNÍ REKLAMACE
 - Vady dodávky, které jsou zřejmé při odběru musejí být reklamovány ihned při převzetí zboží, jinak právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká.
 - Ostatní zřejmé vady zjištěné například při montáži je kupující povinen oznámit nejpozději do 14 dnů po zakoupení.
 - Vady materiálu je povinen oznámit okamžitě po jejich zjištění ve lhůtě stanovené pro záruku.
- 5) UPLATNĚNÍ REKLAMACE
 - Reklamaci řeší prodávající v součinnosti s výrobcem zboží. Reklamace musí být uplatněna vždy v prodejně, kde bylo zboží zakoupeno.
- 6) VYŘÍZENÍ REKLAMACE
 - Vyřídí-li se reklamáce výměnou vadného výrobku nebo jeho součástí za bezvadný, běží na nový výrobek nebo jeho součást nová záruční doba od převzetí výrobku (součástí).
- 7) ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
 - Vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva.
 - Vady způsobené normálním opotřebením, atmosférickými, nebo chemickými vlivy.
 - Vady způsobené při dopravě zboží dopravním prostředkem zákazníka.
 - Vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, opravou, údržbou, nebo nesprávným používáním zboží.
 - Drobné odchylky potahových látek v barevném tónu proti vzorku látky.
- 8) Reklamace se vyřizuje dle vnitropodnikového Reklamačního řádu.
- 9) Výrobce si vyhrazuje nárok zamítnout reklamaci z důvodu hygienického znečištění matrace.